

Juni 2018

Gebrauchsanweisung

Rund um die Uhr sicher verbunden




Inhaltsverzeichnis

Bedienung	2
Rückseite mit Sensoren	4
Zubehör	5
Akku laden	6
Ein- und Ausschalten	8
Auslösen eines Notrufes	9
Automatischer Sturzalarm	10
Telefonieren	12
Konfigurieren	13
Wichtige Hinweise	14
Weitere Informationen	19

Bedienung

Hilferuf-Knopf A:

4 Sek. drücken, um Anruf auszulösen.

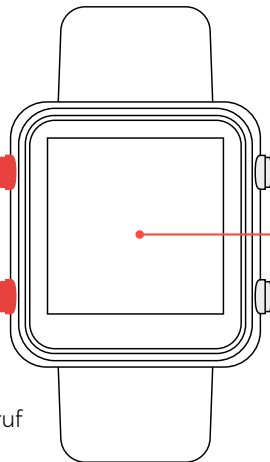

Knopf C:

Lang drücken = Uhr ein-/ausschalten
Kurz drücken = Display an-/ausmachen

Display mit Touchscreen:

Streichen Sie mit dem Finger nach rechts oder links, um zum Menü (Apps) zu gelangen.


Hilferuf-Knopf B:

4 Sek. drücken, um Anruf auszulösen.


Knopf D:

Lang drücken = Zurück zum Ziffernblatt
Kurz drücken = Zurück bzw. Verlassen einer App

Rückseite mit Sensoren

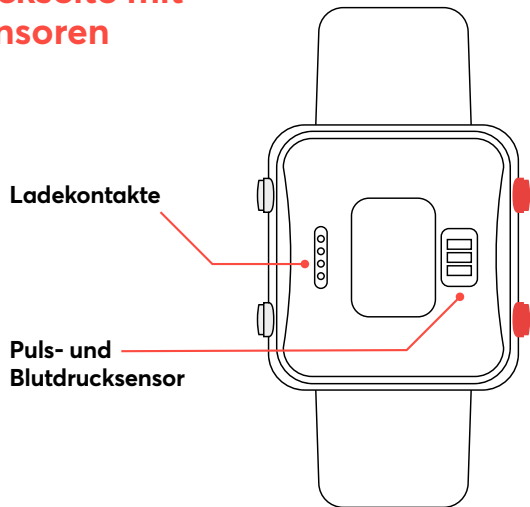

Zubehör

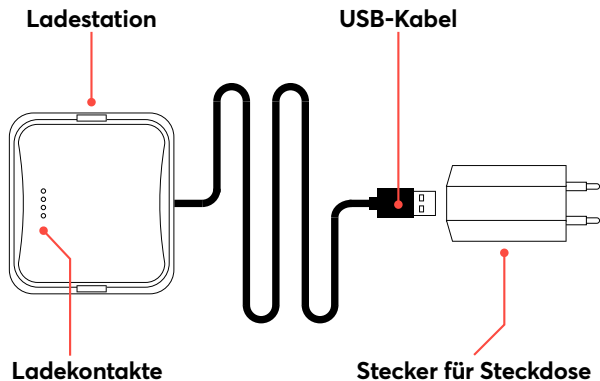


Das Zubehör befindet sich in der Verpackung unterhalb des schwarzen Einsatzes, wo die aidwatch drin ist. Nehmen Sie die Uhr raus und ziehen Sie den Einsatz aus der Box.

Akku laden

Achtung

Damit die aidwatch funktioniert, müssen Sie den Akku täglich während drei Stunden laden. Sie können die Uhr auch länger (z.B. über Nacht) in der Ladestation lassen. Laden Sie Ihre aidwatch auch vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Um den Akku zu laden, legen Sie die aidwatch in die Ladestation, so dass die Ladekontakte der Uhr diejenigen der Station berühren. Drücken Sie dann leicht auf das Gehäuse, bis es fest in der Station hält. Verbinden Sie die Ladestation über das USB-Kabel und den mitgelieferten Stecker mit einer Steckdose. Falls Sie wissen möchten, wie viel Prozent des Akkus bereits geladen sind, drücken Sie den Knopf C. Die Prozentanzeige erscheint nur, wenn die Uhr ausgeschaltet ist.

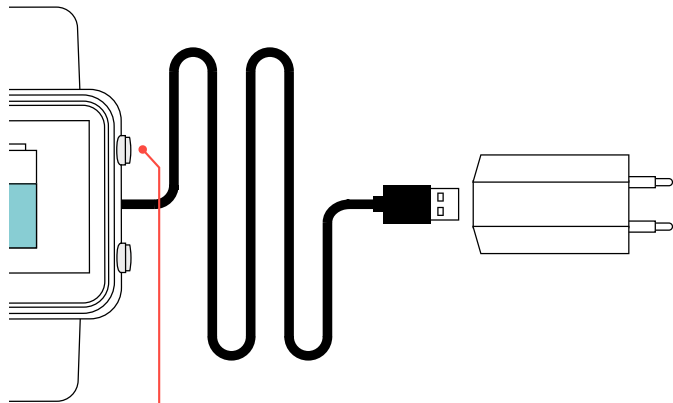

Knopf C:

Kurz drücken = Anzeige Ladestatus

Ein- und Ausschalten

Halten Sie den oberen, silbernen Knopf (mit C gekennzeichnet) solange gedrückt, bis das Display angeht. Sobald Sie das Ziffernblatt sehen, ist die Uhr einsatzbereit. Dies kann eine Weile dauern.

Das Display wird nach ein paar Sekunden automatisch dunkel, um Akku zu sparen. Drücken Sie kurz auf den Knopf C, damit es wieder angeht bzw. das Ziffernblatt erscheint. Bei erneutem Drücken wird das Display wieder dunkel. Um die Uhr ganz auszuschalten, halten Sie Knopf C etwa für drei bis vier Sekunden gedrückt.

Auslösen eines Notrufes

Um einen Notruf auszulösen, drücken Sie ca. für vier Sekunden einen der zwei roten Hilferuf-Knöpfe. Beim oberen Knopf ist Ihr Notfallkontakt A und beim unteren Ihr Notfallkontakt B gespeichert. Testen Sie beide Knöpfe, bevor Sie die Uhr in Betrieb nehmen. Wenn Sie einen Anruf beenden möchten, tippen Sie das Telefonzeichen unten rechts auf dem Display an.

Hinweis

Informieren Sie Ihre Notfallkontakte bevor Sie deren Nummern speichern und geben Sie diesen Personen ebenfalls die Telefonnummer Ihrer aidwatch zum Speichern. So wissen Ihre Kontaktpersonen sofort, dass es sich um einen Notfall handelt, wenn Ihre aidwatch anruft.


Automatischer Sturzalarm

Sollten Sie stürzen oder mit dem Arm heftig um sich schlagen, wird automatisch Ihr Notfallkontakt A angerufen. Zudem erhalten beide Notfallkontakte eine SMS mit dem Text «FALLALERT».

Wenn der Alarm ausgelöst wird, sagt die Uhr dreimal: «Fall alert activated, to deactivate press the A button.» **Im Falle eines Fehlalarms können Sie während dieser Sprachmitteilung den Alarm wieder stoppen, indem Sie den Hilferuf-Knopf A drücken.** Falls Sie den Alarm nicht rechtzeitig abbrechen, wird Ihr Notfallkontakt angerufen.

Hinweis

Auf aidwatch.ch können Sie in Ihrem Benutzerkonto unter Konfiguration die Funktion «automatischer Sturzalarm» deaktivieren, falls Sie diese nicht auf Ihrer aidwatch haben möchten.

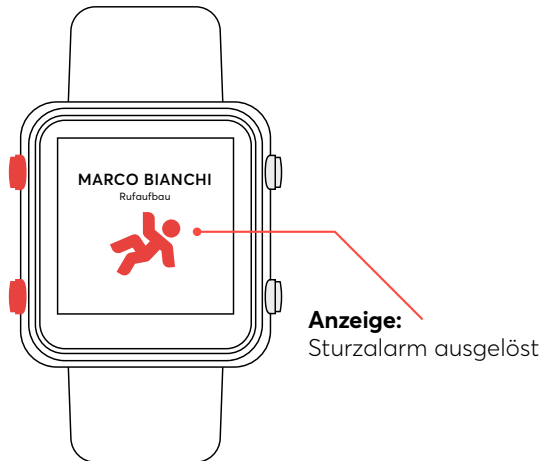

Telefonieren

Dank dem eingebauten Lautsprecher und Mikrofon können Sie mit der aidwatch wie mit einem Handy telefonieren. Das aidwatch-Abo beinhaltet 60 Minuten Gesprächszeit pro Quartal. Falls Sie mehr telefonieren, werden Ihnen zusätzliche Kosten verrechnet. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie einfach das Telefonzeichen unten rechts auf dem Display.

Von Personen, die Ihre aidwatch-Telefonnummer haben, können Sie auf der Uhr auch an- oder zurückgerufen werden. Um einen Anruf anzunehmen, tippen Sie auf das grüne Telefonzeichen.

Hinweis

Die aidwatch kann sogar so konfiguriert werden, dass Anrufe von Ihren Notfallkontakten automatisch entgegengenommen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie online in Ihrem Benutzerkonto unter Konfiguration.

Konfigurieren

Falls Sie die Einstellungen auf Ihrer aidwatch ändern möchten, dann melden Sie sich auf aidwatch.ch in Ihrem Benutzerkonto an. Dort können Sie unter Konfiguration Ihre Notfallkontakte ändern und Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren. Die Änderungen werden dann automatisch auf Ihre Uhr übertragen.

Wichtige Hinweise

Mobilfunk

Die aidwatch funktioniert zurzeit nur in der Schweiz. Es wird das Mobilfunknetz der Swisscom genutzt. Dieses weist zwar schweizweit eine sehr gute Flächenabdeckung auf aber es können dennoch, wenn auch sehr selten, Funkstörungen/-löcher auftreten.

Akku

Der Akku der aidwatch kann bis zu 18 Stunden halten. Dies hängt allerdings stark von der individuellen Nutzung der Uhr ab. Deshalb muss der Akku täglich während drei Stunden geladen werden.

Spritzwasserfest

Die aidwatch ist vor Staub und Strahlwasser geschützt. Beim Händewaschen können Sie die Uhr anbehalten aber vor dem Schwimmen, Baden und Duschen müssen Sie diese ablegen. Bitte beachten Sie, dass Seife irreparable Schäden verursachen kann.

Armband

Da das Uhrenarmband eine integrierte Antenne hat, kann es nur von uns ausgewechselt werden. Nehmen Sie deshalb mit uns Kontakt auf (aidwatch@nestor-swiss.ch), falls Sie ein neues Armband brauchen sollten.

Uhr wird warm

Während des Ladevorgangs oder bei der Verwendung von gewissen Funktionen (z.B. Geofence) kann die aidwatch warm werden. Dies ist sowohl für den Uhrenträger wie auch für die Uhr harmlos.

Reinigung

Reinigen Sie die aidwatch nur mit einem sauberen, trockenen Tuch und verwenden Sie keine Chemikalien oder Seife.

Leihgabe

Da man die aidwatch nur mieten und nicht kaufen kann, muss die Uhr an uns zurückgegeben werden, falls man diese nicht mehr braucht bzw. das Abonnement gekündigt hat.

Rückgaberecht

Sie haben das Recht, die aidwatch innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt ohne Angabe eines Grundes zurückzugeben. Bitte melden Sie die Rückgabe innerhalb dieser Frist per Brief oder E-Mail (aidwatch@nestor-swiss.ch) bei uns an.

Senden Sie die Uhr unbenutzt und unbeschädigt in der Originalverpackung an folgende Adresse:

Nestor Intl. Corp. AG, Sandgrube 29, 9050 Appenzell.

Es gilt das Datum der Postaufgabe und die Versandkosten werden vom Kunden übernommen.

Garantie

Ab dem Kauf haben Sie während der ersten zwei Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. Nicht unter Garantie fallen Beschädigungen durch unsachgemässe Behandlung (z.B. Wasserschäden) oder Defekte, die aufgrund von externen Einflüssen entstanden sind sowie Gebrauchsspuren am Gehäuse, Armband usw. Falls Sie Modifikationen an der Uhr vornehmen (z.B. Öffnen des Gehäuses), verlieren Sie ebenfalls den Anspruch auf eine Garantieleistung. Entnehmen Sie abschliessende Informationen unseren AGB auf aidwatch.ch/agb.

Weitere Informationen

Erklärungen zu den Funktionen finden Sie im Shop auf aidwatch.ch.

Antworten auf Fragen, die uns häufig gestellt werden, haben wir ebenfalls auf unserer Website unter Auskunft aufgeführt.

Bitte entnehmen Sie abschliessende Informationen bezüglich des Gebrauchs und der Funktionen der aidwatch unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen auf aidwatch.ch/agb.

Information:

www.aidwatch.ch

aidwatch@nestor-swiss.ch

+41 71 340 00 55

(Mo. bis Fr. zwischen
9.00 und 17.00 Uhr)

Anschrift:

Nestor Intl. Corp. AG

Sandgrube 29

CH-9050 Appenzell